



medicalbees
System-driven Surgery

ENT / HNO

The new ENT portfolio includes a large variety of different surgical instruments for operations in the pharynx.

Das neue HNO-Portfolio umfasst eine große Anzahl an verschiedenen chirurgischen Instrumenten für Operationen im Rachenraum

- ✓ From the idea to construction, manufacturing and assembly: all steps in-house
- ✓ Instruments are processed by specially trained surgical mechanics
- ✓ High-quality glare-free surface
- ✓ Surgical stainless steel
- ✓ Most common models are available + specific customer models complete the product line
- ✓ High functionality
- ✓ 100% quality Made in Germany
- ✓ High reliability

- ✓ Alle Entwicklungs-, Produktions- und Verarbeitungsschritte unter einem Dach
- ✓ sorgfältige Verarbeitung durch unsere Chirurgie Mechaniker
- ✓ hochwertige blendfreie Oberfläche
- ✓ Chirurgischer Edelstahl
- ✓ Gängigste Modell + Spezialmodelle
- ✓ Hohe Funktionalität
- ✓ 100% Qualität Made in Germany
- ✓ Hohe Zuverlässigkeit

Mouth gag for tongue blades

A wide and deep portfolio of tongue depressors and handles is available. The following commonly used models are available: DAVIS-BOYLE, MCIVOR, DINGMANN and DAVIS-MEYER. Tongue depressors and handles are compatible with each other. Protection of teeth is achieved by replaceable silicone inserts (for single use). Use to spread the mouth opening during oral and pharyngeal surgeries.




Mundsperrer mit Gleitschiene

Ein breites und tiefes Portfolio an Zungendrucker und Griffen ist verfügbar. Schlagwörter wären DAVIS-BOYLE, MCIVOR, DINGMANN und DAVIS-MEYER. Zungendrucker und Griffe sind untereinander kompatibel. Der Schutz der Zähne wird durch auswechselbare Silikon-Schützer (zum Einmalgebrauch) erreicht. Verwendung zum Aufspreizen der Mundöffnung bei Operationen im Oral- und Rachenbereich.

Mouth gag

The most popular models are manufactured at medical bees. DENHART and JENNINGS. Protection of teeth is achieved by replaceable silicone inserts. Used to spread the mouth opening during oral and pharyngeal surgeries.

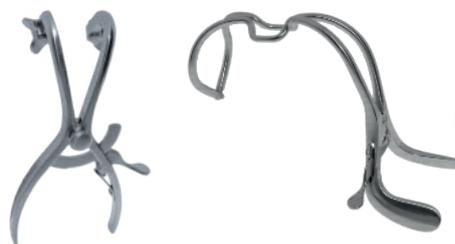

Mundsperrer mit Sperre ohne Zungendrucker

Die gängigsten Modelle werden bei uns hergestellt das sind DENHART und JENNINGS. Der Schutz der Zähne wird durch auswechselbare Silikon-Schützer erreicht. Verwendung zum Aufspreizen der Mundöffnung bei Operationen im Oral- und Rachenbereich.

Tonsillectom

We manufacture DANIELS and SLUDER-Ballenger tonsillectomes. Used for surgical removal of palatine tonsils. Replacement blades are available.



Tonsillotome

Die gängigsten Modelle werden bei uns hergestellt das sind DANIELS und SLUDER-Ballenger. Zur Verwendung bei einer operativen Entfernung von Gaumenmandeln. Ersatzklingen sind verfügbar.

Tonsil Snare

The following models are available: EVES, RÖDER, BRÜNNINGS. They are used for cutting soft tissue. Replacement blades are available in different diameters, also as open or closed version.



Tonsillenschürer

Die gängigsten Modelle werden bei uns hergestellt das sind Eves, Röder und Brünnings. Verwendung zum Schneiden von Weichgewebe. Ersatzschlingen sind in verschiedenen Abmessungen verfügbar. Diese gibt es in geschlossener und offener Form.

Tourniquets, Stylet

The RUMMEL-BELMONT models are offered in various diameters and shapes with and without locking function. A large variety of stylets are also available.



Tourniquets, Fadenfänger

Das RUMMEL BELMONT Modell wird bei uns in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Rastfunktion hergestellt. Breites und tiefes Portfolio an Fadenfängern.

Adenotome

Two product families LaForce and Shambough are produced in our company. Use for cutting palatine tonsils and adenoids in the pharynx. The blade guide ensures that the removed cutting material is collected and does not remain in the surgical area. Replacement blades are available.



Adenotome

Zwei Produktfamilien LaForce und Shambough werden bei uns hergestellt. Verwendung zum Schneiden von Gaumenmandel und Polypen im Rachenraum. Durch die Messerführung ist gewährleistet, dass das entfernte Schneidgut aufgefangen wird und nicht im Operationsgebiet verbleibt. Ersatzklingen sind verfügbar.

